

Bernafon Encanta

Eine einzigartige Familie.
Vier passende Lösungen.



Bernafon

unterstützt Sie im Alltag

Sie möchten Ihren geschätzten Kundinnen und Kunden die beste Betreuung und die besten Lösungen bieten? Mit Bernafon Encanta können Sie das.

5 Wege, wie Bernafon den Unterschied macht

Einzigartige Bernafon Klangqualität

Durch eine andere Art der Klangverarbeitung sind Bernafon Hörsysteme bekannt für ihren klaren und natürlichen Klang.

Hochwertige Lösungen, auf die Sie sich verlassen können

Jedes Detail von Encanta wurde sorgfältig entwickelt und getestet, um die höchsten Standards zu erfüllen oder zu übertreffen.

Eine vierköpfige Produktfamilie offeriert Ihnen mehr

Mit den vier verständlichen Technologiestufen von Encanta finden Sie leichter die passende Lösung für Ihre Kundinnen und Kunden.

Die Herausforderung der Erstanpassung meistern

Mit einer Anpassungssoftware, die für ihre Benutzerfreundlichkeit bekannt ist, erhalten Sie ein Anpassungskonzept, das den Komfort der Hörgeräte und die Akzeptanz der Erstanpassung erhöht.

Ihr Leben einfacher gestalten

Bernafon geht auf Ihre Bedürfnisse ein. Zusätzlich können Sie mit der digitalen Kundenplattform MyBernafon Ihre Bestellungen aufgeben und vieles mehr.



Unser Versprechen einlösen

Die Zusammenarbeit mit Bernafon bedeutet, dass Sie Teil einer unterstützenden Familie sind.

Eine Familie, die auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Klangtechnologie und einer langjährigen, engen Zusammenarbeit mit Hörakustikern aufbaut. Als Teil der Demant Gruppe blicken wir auf mehr als ein

Jahrhundert Erfahrung in der Hörsystemversorgung zurück – von der Diagnostik bis hin zur modernsten Klangverarbeitung.

DIE ENCANTA FAMILIE,

vier passende Lösungen

Ihre Kunden haben einzigartige Hörbedürfnisse. Deshalb bietet Bernafon Encanta vier passende Lösungen an, die es Ihnen erleichtern, jeden Kunden entsprechend seinen individuellen Bedürfnissen und seinem Budget zu versorgen.



Encanta 100 CONNECT

In Verbindung bleiben

Für Kunden, die den grössten Teil ihrer Zeit zu Hause oder in geräuscharmer Umgebung verbringen. Unterstützt Gespräche unter vier Augen mit klarem und natürlichem Klang und bietet Komfort und Bewusstsein für die Klangumgebung.

wenig
laut

Hörumgebung

1:1

Gesprächsart

Encanta 200 GO

Unterwegs sein

Für Kunden, die sich beim Sprachverstehen in geräuschvollen Umgebungen auf ihre Hörsysteme verlassen. Unterstützt komfortables Sprachverstehen bei Gesprächen unter vier Augen durch adaptives Störgeräuschmanagement.

laut

Hörumgebung

1:1

Gesprächsart

Reibungslose Konversation

Mit der neuen **Smart Sensor** Technologie in Encanta 300 und 400 können Ihre Kunden bei Gesprächen unter vier Augen und in Gruppen ein noch besseres Sprachverstehen erzielen. Die Technologie erkennt Kopf- und Körperbewegungen und passt die Direktionalität und Störgeräuschunterdrückung automatisch an die sich ändernden Hörbedürfnisse Ihrer Kunden an.



Encanta 300 ENGAGE

In der Gruppe teilnehmen

Für Kunden, die ein aktives und soziales Leben führen und häufig an Gesprächen mit mehreren Personen teilnehmen. Ermöglicht in schwierigen Klangumgebungen mit Hilfe des Smart Sensors einen nahtlosen Übergang von einem konzentrierten Einzelgespräch zur Teilnahme an Gruppengesprächen.



Hörumgebung



Gesprächsart

Encanta 400 PRO

Für alles bereit sein

Für Kunden, die kompromisslose Klangqualität und die beste Technologie zur Unterstützung des Sprachverstehens in jeder Umgebung wünschen. Bietet grösste Unterstützung und maximale Leistung in den komplexesten Hörsituationen.



Hörumgebung



Gesprächsart

In Verbindung bleiben



Hörumgebung



Gesprächsart

Encanta 100 ist auf Kunden ausgerichtet, die den grössten Teil ihrer Zeit zu Hause oder in geräuscharmer Umgebung verbringen. Es unterstützt Gespräche unter vier Augen mit klarem und natürlichem Klang und bietet Komfort und ein Bewusstsein für die Klangumgebung.

Klarer und natürlicher Klang

Wie sich die Klangqualität von Bernafon unterscheidet

Bei brilliantem Klang kommt es auf die Details an. Encanta verstärkt den Klang wie kein anderes Hörsystem. Für die Verarbeitung schnell modulierender Signale, wie Sprache und Musik, verwendet es einen einzigartigen Breitbandkanal. Dadurch bleiben die natürlichen Sprachmuster intakt und die Qualität von Musiksignalen erhalten. In Kombination mit 24 Frequenzbändern für die Verarbeitung langsam modulierender Signale wie Geräusche bietet Encanta aussergewöhnliche Klangklarheit und Hörkomfort.



Bernafon
Klangqualität

Smart Noise Reduction



Unterstützt durch 360° Wahrnehmung

Feste Omnidirektionalität

Nimmt Geräusche aus allen Richtungen auf, unabhängig ob es sich um eine Stimme aus einem anderen Raum oder das Klingeln an der Tür handelt.

Basic Smart Noise Reduction

Bietet eine Störgeräuschunterdrückung von bis zu 6 dB. Dies trägt zur Verbesserung der Klangqualität und der klaren Sprachverständlichkeit in geräuscharmen Umgebungen bei.



Das können Sie Ihren Kunden sagen

Encanta 100 bereichert Ihre Verbindungen zu Hause mit Familie und Freunden.

Es sorgt dafür, dass leise und laute Stimmen klar und deutlich zu hören sind, so dass Sie sich auch unter vier Augen gut unterhalten können. Ausserdem hören Sie alles um sie herum mit klarem und natürlichem Klang.

Unterwegs sein



Hörumgebung




Gesprächsart

Encanta 200 ist für Kunden gedacht, die sich beim Sprachverstehen in geräuschvollen Umgebungen auf ihr Hörsystem verlassen. Es unterstützt das komfortable Sprachverstehen bei Gesprächen unter vier Augen durch adaptives Störgeräuschmanagement.

Optimierung des Sprachverstehens im Störgeräusch

Verbessertes Smart Noise Management

Die fortschrittliche Smart Noise Reduction von Encanta hilft Ihren Kunden, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist. Nämlich auf die Gespräche mit einer Person und nicht die Geräusche rundherum. Um das bestmögliche Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) für das Sprachverstehen zu erreichen, kombiniert Encanta 200 zwei Klangverarbeitungstechnologien, die nahtlos ineinandergreifen. So erhalten Ihre Kunden eine bessere Klangqualität, klarere Sprache und mehr Hörkomfort bei Störgeräuschen.

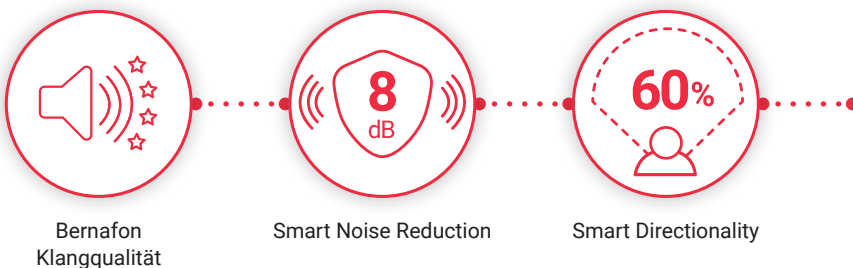



Verbessert die Sprachverständlichkeit

Smart Directionality

Erkennt automatisch, woher die Geräusche kommen, so dass sie effizient reduziert werden können.

Smart Noise Reduction

Erweitertes maschinelles Lernen kann besser zwischen Sprache und Störgeräuschen unterscheiden, wodurch die Störgeräuschunterdrückung effizienter wird.



Das können Sie Ihren Kunden sagen

Encanta 200 ist ideal, um Ihr Leben unterwegs zu genießen. Es bietet komfortables, einfaches Sprachverstehen bei Gesprächen unter vier Augen im Innen- und Aussenbereich.

In der Gruppe teilnehmen



Hörumgebung




Gesprächsart

Encanta 300 ist auf Kunden ausgerichtet, die ein aktives, geselliges Leben führen und häufig an Gesprächen mit mehreren Personen teilnehmen. In einer Gruppe bietet es einen nahtlosen Übergang von einem konzentrierten Einzelgespräch zur Teilnahme an Gruppengesprächen in einer schwierigen Geräuschumgebung.

Optimierung von Gruppengesprächen

Der Unterschied der neuen Smart Sensor Technologie

Encanta 300 erweitert das Smart Noise Management mit dem bahnbrechenden Smart Sensor. Ein Bewegungssensor erkennt Kopf- und Körperbewegungen. Der Smart Sensor nutzt diese Informationen, um die Smart Directionality und die Smart Noise Reduction anzupassen und so das Sprachverstehen in Situationen mit mehreren Personen zu optimieren.

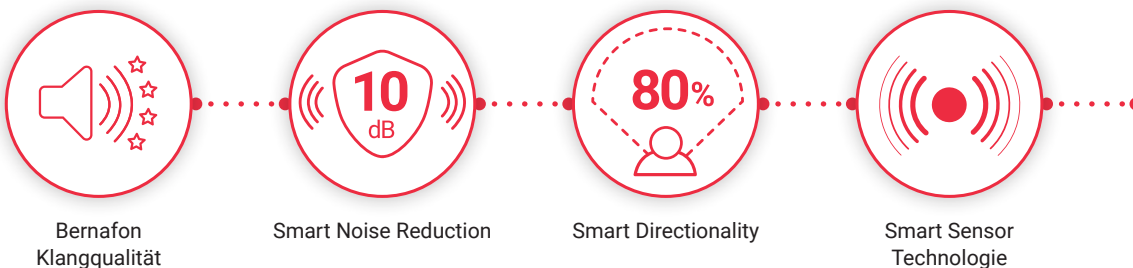



Nahtlose Übergänge bei Störgeräuschen

So funktioniert der Smart Sensor

Wenn sich Ihr Kunde im Gespräch auf eine Person konzentriert, erhöht der Smart Sensor die Richtionalität und verstärkt die Störgeräuschunterdrückung, damit er sich auf die Person konzentrieren kann.

Wenn Ihr Kunde seinen Kopf von links nach rechts bewegt, um einem Gruppengespräch zu folgen, oder wenn er auf einer lauten Strasse spazieren geht, schaltet das System automatisch in einen omnidirektionalen Modus um und verringert die Störgeräuschunterdrückung. So nehmen sie die gesamte Umgebung um sie herum besser wahr.



Das können Sie Ihren Kunden sagen

Encanta 300 wird Ihnen helfen, in Gruppengesprächen aktiv teilzunehmen. So können Sie auf natürliche Weise von der Konzentration auf eine einzelne Person in einer Gruppe zu einem Gruppengespräch in einer geräuschvollen Umgebung übergehen.

Für alles bereit sein



Hörumgebung



Gesprächsart

Encanta 400 ist für Kunden ausgelegt, die eine kompromisslose Klangqualität und die beste Technologie zur Unterstützung des Sprachverstehens in jeder Umgebung wünschen. Es bietet die beste Unterstützung und maximale Leistung in den komplexesten Situationen.

Optimales Sprachverstehen und Klangklarheit

Alles maximal

Mit Encanta 400 profitieren Ihre Kunden von der maximalen Leistung von Smart Directionality und Smart Noise Reduction, inklusive einer stärkeren Geräuschunterdrückung von bis zu 12 dB. In Kombination mit der Smart Sensor Technologie und der erweiterten Frequenzbandbreite können Ihre Kunden selbst in den lautesten Gruppenumgebungen eine verfeinerte Klangqualität, klares Sprachverstehen und Hörkomfort genießen.



Bernafon
Klangqualität



Smart Noise Reduction



Smart Directionality



Smart Sensor
Technologie




Erweiterte
Frequenzbandbreite



Noch bessere Klangqualität

Der Unterschied einer erweiterten Frequenzbandbreite

Encanta 400 bietet eine erweiterte Frequenzbandbreite, die von 80 Hz bis 10 kHz reicht. Damit erhalten Ihre Kunden Zugang zu einem umfassenderen Klangspektrum für ein klares, nuanciertes Klangerlebnis. Sie erleben sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Frequenzen ein naturgetreueres Klangbild und eine breite Palette an Klangnuancen, zum Beispiel bei Musik.

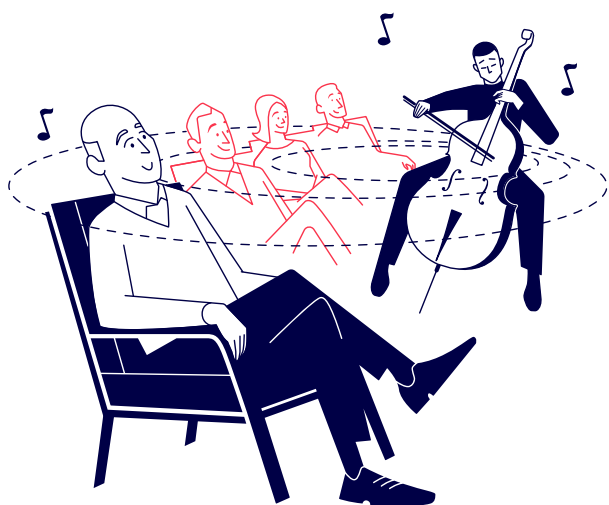

Das können Sie Ihren Kunden sagen

Encanta 400 unterstützt Sie unabhängig davon, wie laut eine Situation ist oder wie viele Personen an einem Gespräch beteiligt sind. Encanta 400 ist mit der fortschrittlichsten Bernafon Technologie zur Unterstützung des Sprachverstehens in jeder Umgebung ausgestattet.

LEISTUNGSDATEN

Eine Familie mit klinischen Ergebnissen

Die Wahl eines Hörsystems ist für jeden potenziellen Nutzer schwierig. Aus diesem Grund haben wir alle vier Technologiestufen getestet, um Ihnen und Ihren Kunden die erwiesenen Vorteile der einzelnen Lösung für die Lebensqualität greifbar zu machen.

Vier klinische Ergebnisse für die Encanta Familie*


Besseres Sprachverstehen – Gespräche unter vier Augen			
Ergebnisse		Wesentliche Merkmale	Vorteile
Encanta 100 CONNECT	11 dB SPL in Ruhe ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Amplification 	Sprachverstehen, ohne dass der Sprecher seine Stimme erheben muss.
Encanta 200 GO	30 % im Störgeräusch ²	<ul style="list-style-type: none"> • 8 dB Smart Noise Management • Smart Amplification 	Signifikante Verbesserung des Sprachverstehens bei Gesprächen unter vier Augen bei geräuschvoller Umgebung.

Besseres Sprachverstehen – Gruppengespräche bei Störgeräuschen			
Ergebnisse		Wesentliche Merkmale	Vorteile
Encanta 300 ENGAGE	15 % ³	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Sensor • 10 dB Smart Noise Management • Smart Amplification 	Verbessertes Sprachverstehen bei Gruppengesprächen in geräuschvollen Umgebungen, wenn die sprechende Person wechselt.
Encanta 400 PRO	19 % ³	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhte Frequenzbandbreite • Smart Sensor • 12 dB Smart Noise Management • Smart Amplification 	

Testen von Gruppengesprächen im Störgeräusch

Gruppengespräche sind komplex und anspruchsvoll – oft mit Hintergrundgeräuschen, unvorhersehbaren Sprachquellen, sich überlagernder Sprache und wechselnder Aufmerksamkeit. Wir haben Encanta 200, 300 und 400 getestet, indem wir ein komplexes Gruppengespräch im Störgeräusch simuliert haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die zusätzliche Technologie mit Smart Sensoren in Encanta 300 und Encanta 400 den Nutzen³ des Smart Noise Management bei Gruppengesprächen verdoppelt.

Der Unterschied bei den Smart Sensoren

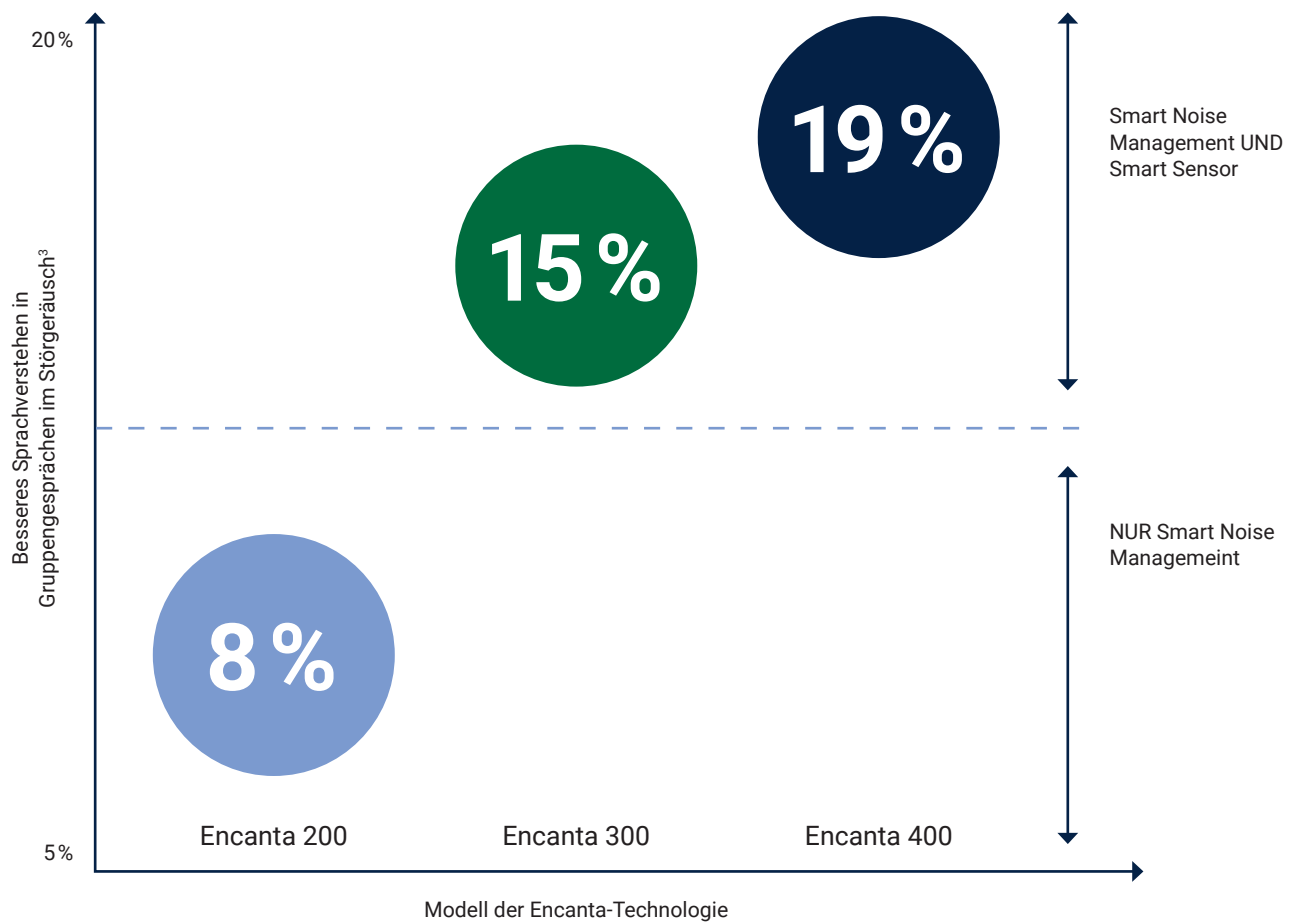

* Alle Daten wurden im Rahmen einer klinischen Studie zwischen August und Oktober 2023 erhoben. Die Studie umfasste 25 Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter von 73 Jahren, einer durchschnittlichen Höreräteträgerschaft von 12 Jahren und einer durchschnittlichen symmetrischen Hörschwelle von 47 dB HL (125 Hz-8 kHz). Alle angegebenen Daten unterscheiden sich signifikant von ihrer jeweiligen Referenz.

¹ Der Vergleich für das Encanta 100 Sprachverstehen (11dB SPL) erfolgt zwischen dem unterstützten und dem nicht unterstützten SRT50 in Ruhe.

Der Vergleich für das Encanta 200 Sprachverstehen im Störgeräusch (OLSA, 2,3dB SNR) ist zwischen dem SRT50, der mit und ohne Störgeräuschmanagement erzielt wurde (NAL-NL2 Verstärkungsziele).

³ Der Vergleich für Encanta 200, 300 und 400 (CCOLSA, 8%, 15% bzw. 19%) bezieht sich auf das Sprachverstehen mit und ohne Störgeräuschmanagement (Referenz Encanta 200 mit NAL-NL2 Verstärkungszielen).

OASIS^{next} ANPASSSOFTWARE

Bessere Erstanpassungen



Eine gute Erstanpassung hat viele Vorteile. Höhere Akzeptanz, grössere Nutzung und Zufriedenheit, weniger Rückgaben, weniger Bedarf an Feinanpassung und eine grosse Zeitersparnis, um nur einige Vorteile zu nennen. Bernafon Hörsysteme sind dafür bekannt, dass sie dank der einzigartigen Anpassregel BernaFit NL eine komfortable Erstanpassung ermöglichen. Zudem ist die Oasis^{next} Anpasssoftware für ihre Bedienungsfreundlichkeit bekannt.

NEU!

Bessere Genauigkeit

Die neuen miniFit Detect Hörer verbessern das Anpasserlebnis für Sie und Ihre Kunden.

- Einfachere und schnellere Anpassung mit weniger Fehlern beim Anpassen der Hörer
- Mehr Präzision auf der Grundlage von Kalibrierungsdaten innerhalb von +/- 1 dB der Zielverstärkung in allen 24 Frequenzbändern

Ihre Kunden im Mittelpunkt

Das **Personalisierungstool** hilft Ihnen bei der optimalen Erstanpassung. Es bewertet die Klangwahrnehmung und die Vorlieben jedes Kunden. Die Grundlage dafür sind Nutzer-Antworten auf wichtige Fragen.

Einfache und geführte Feinanpassung

Der **Anpassassistent** führt Sie durch das Gespräch mit Ihren Kunden, um deren Bedürfnisse in einer Vielzahl von Hörsituationen zu ermitteln. Hinweise zur Feinanpassung helfen Ihnen, das volle Potenzial der einzelnen Funktionen zu nutzen.

Kontrolle des Kundenfortschritts

Conversation Data verfolgt die akustische Umgebung und die Gesprächsbeteiligung Ihres Kunden im Laufe der Zeit. So erhalten Sie einen wertvollen Beratungsinput, um seine Hörerfahrung und seine Vorlieben zu besprechen.

NEU!

**Satterer Klang mit
Erweiterung der
niedrigen Frequenzen**

Das Music Experience Programm kann jetzt tiefere Bässe mit einer Verstärkung bis hinunter zu 80 Hz an das Ohr übertragen, so dass Ihre Kunden ein Gefühl von mehr Klangfülle haben.





MUSIK

Ein umfassenderes Erlebnis

Bernafon bietet seit langem ein aussergewöhnliches Musikerlebnis mit einem einzigartigen Algorithmus zur Verstärkung von Live- und aufgenommener Musik. Encanta kommt mit neuen Upgrades, um das musikalische Hörerlebnis Ihrer Kunden noch besser zu machen.

Präzisere Musik-Audioqualität

Der aktualisierte Sound Optimizer verbessert die Klangqualität beim Streaming von Musik..

Anpassen für besseren Musikgenuss

In der Oasis^{next} Anpasssoftware können Sie auch das Music Experience Programm für Ihre Kunden feinabstimmen. Musiker profitieren von dieser zusätzlichen Flexibilität besonders.



Musiker bestätigen
eine hervorragende Leistung:

85%

dieser anspruchsvollen Benutzergruppe zogen Music Experience dem Standard-Sprachprogramm vor – beim Hören von live, aufgenommener oder gestreamter Musik.*

*2021: Basierend auf Daten einer klinischen Studie, die bei Bernafon AG, Bern Schweiz, erhoben wurden.

Erweiterte Konnektivität


Konnektivität ist wichtig. Encanta bietet eine Erweiterung der Konnektivität und des direkten Streaming für alle Bedürfnisse an. Dank Bluetooth® Low Energy erhalten Ihre Kunden eine unglaubliche Akkulaufzeit.

Made for iPhone®

Ihre Kunden, die ein iPhone oder iPad verwenden, erhalten Zwei-Wege-Audio, direktes Streaming und alle Vorteile der Freisprechkommunikation.

Mit der Bernafon App liegt die Kontrolle in Ihren Händen

Die verbesserte App macht es Ihren Kunden einfacher denn je, die diskrete Steuerung, Personalisierung und Fernunterstützung zu nutzen. Und Sie erhalten nützliche Nutzungsdaten, um Ihren Tag effizienter zu gestalten.

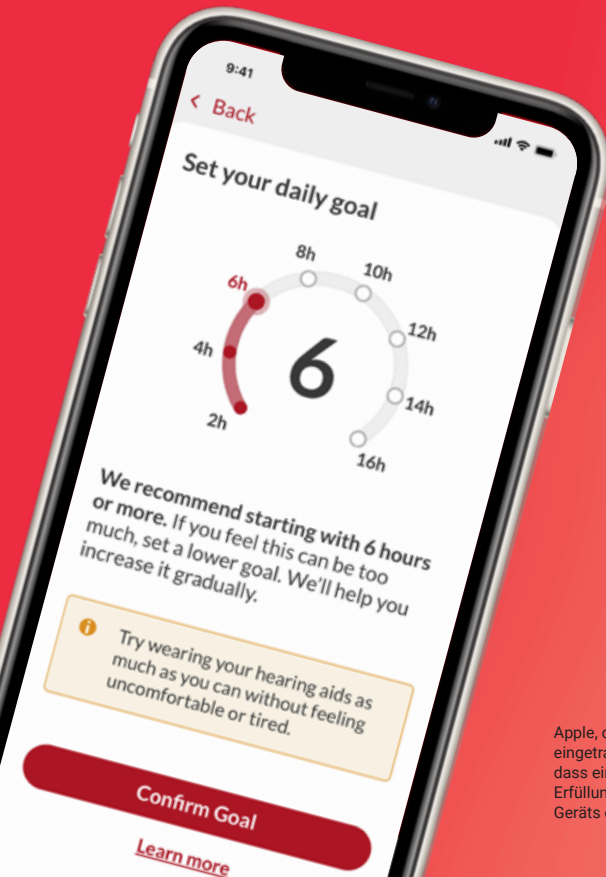

NEU

Ein Durchbruch in der Android-Konnektivität

Encanta ist vollständig kompatibel mit allen LE Audio-fähigen Android-Telefonen – der neuesten Bluetooth®-Technologie*. LE Audio kombiniert das Beste aus zuverlässigem Zwei-Wege-Streaming und Freisprechkommunikation mit niedrigem Energieverbrauch.

Made for
iPhone | iPad | iPod


Works with
android

*LE Audio – Low Energy Audio.

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad, Mac und Mac-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA sowie anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Die Verwendung des Made for Apple Logos bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für im Logo genannte Apple-Produkte entwickelt und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und gesetzlicher Vorschriften.

Ein ganzer Tag Energie in nur einer Stunde

Die wiederaufladbaren Encanta-Hörsysteme werden mit einem neuen, kleineren Ladegerät geliefert, bei dem die Effizienz im Vordergrund steht.

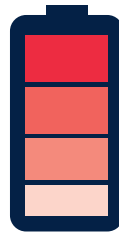

2 Stunden – 100% Aufladung
60 Minuten – 16 Stunden
30 Minuten – 8 Stunden
15 Minuten – 4 Stunden




Das können Sie Ihren Kunden sagen

Effizienteres Laden kann Ihr Leben einfacher machen und Ihnen den ganzen Tag über Sicherheit geben.

NEU!

- Kleineres Ladegerät
- Schnelleres Aufladen
- Bis zu 24 Stunden Akkuleistung mit einer vollen Ladung
- Ausgelegt für eine Batterielebensdauer von 5 Jahren

Kurzübersicht über die Encanta Familie

	Encanta 100 CONNECT 	Encanta 200 GO 	Encanta 300 ENGAGE 	Encanta 400 PRO 
Smart Amplification	Ja	Ja	Ja	Ja
Smart Sensor	Nein	Nein	Ja	Ja
Smart Directionality (Fokus)	Nein	60% Auswirkung	80% Auswirkung	100% Auswirkung
Omni Startmodus	Fest	Fest	Pinna-Effekt	Pinna-Effekt
Smart Noise Reduction	6 dB	8 dB	10 dB	12 dB
Impulsschall- unterdrückung Plus	15 dB	20 dB	25 dB	30 dB
Wind- & Kontaktunterdrückung	Ja	Ja	Ja	Ja
Frequenzbandbreite	8 kHz	8 kHz	8 kHz	10 kHz
Frequenzbereiche	14	18	20	24

Klangqualität trifft auf Design

Encanta ist elegant und komfortabel. Mit einer neuen miniRITE-Bauform, die noch kleiner und unauffälliger ist.



Bernafon Encanta ist in acht attraktiven Farben erhältlich



The Bernafon Sound Experience

Wir bei Bernafon haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Arbeit von Hörakustikern zu unterstützen. Wir helfen ihnen, eine hervorragende Versorgung zu ihren Bedingungen zu bieten. Denn wir wissen, dass Fachwissen wichtig ist. Professionelle Betreuung ist der Schlüssel, der einzigartige Technologie in persönliche Lösungen verwandelt. Lösungen, die Menschen mit Hörverlust helfen, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchten. Als Teil der Demant Gruppe, mit mehr als einem Jahrhundert an Erfahrung und Know-how, profitiert Bernafon von einem der weltweit stärksten Forschungs- und Entwicklungsteams im Bereich der Hörsystemversorgung. Diese Erfahrung und dieses Engagement stellen wir Hörakustikern zur Verfügung – damit sie ein einzigartiges Klangerlebnis bieten können.

Weitere Informationen über unsere Hörsysteme finden Sie auf unserer Bernafon Website.

Hauptsitz

Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Dänemark

Bildmaterial: Einige Bilder wurden mit Hilfe von Programmen der Künstlichen Intelligenz (KI) erstellt

Bernafon Unternehmen

Australien • Kanada • China • Dänemark • Finnland • Frankreich • Deutschland • Italien • Japan • Korea • Niederlande • Neuseeland • Polen • Südafrika • Spanien • Schweden • Schweiz • Türkei • Vereinigtes Königreich



www.bernafon.ch

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE