

Bernafon Encanta

Una familia única
Cuatro soluciones infalibles



Bernafon

Te empodera cada día

Quieres ofrecer a tus pacientes la mejor atención y las mejores soluciones, incluso en tus días más ocupados. Con Bernafon Encanta, puedes.

5 formas en las que Bernafon marca una diferencia

Calidad de sonido Bernafon de renombre

Los audífonos Bernafon son conocidos por su sonido claro y natural, al procesar el sonido de forma diferente.

Soluciones fuertes en las que poder confiar

Cada detalle de Encanta ha sido minuciosamente diseñado y probado para cumplir o superar los más altos estándares de rendimiento y confiabilidad.

Una familia de cuatro te permite ofrecer más

Los cuatro niveles de tecnología de Encanta te ayudan a encontrar la solución adecuada para cada usuario más fácilmente.

Superar el desafío de la primera adaptación

Con nuestro software de adaptación conocido por su sencillez de uso, obtienes un proceso de ajuste diseñado para que los audífonos sean más cómodos y la primera adaptación más aceptable para tus pacientes.

Facilitarte la vida

Nuestro equipo está enfocado en tus necesidades. Y con la plataforma de apoyo digital MyBernafon, puedes realizar pedidos y mucho más, cuando y donde quieras.



Cumplir nuestra promesa

Trabajar con Bernafon significa que formas parte de una familia que te respalda. Una familia con décadas de experiencia en tecnología del sonido y un orgulloso historial de trabajo estrecho con los audióprotesistas. Como parte del Grupo Demant, también contamos con el respaldo de más de un siglo de excelencia en cuidado auditivo, desde diagnósticos a procesamiento de la señal de última generación.

Cuatro soluciones infalibles

Cada uno de tus pacientes es único. Es por ello que Bernafon Encanta presenta cuatro soluciones infalibles para que encuentres más fácilmente la opción adecuada para cada paciente según sus necesidades y presupuesto individuales.



Encanta 100 CONNECT

Conectado con la conversación

Para usuarios que pasan la mayor parte de su tiempo en casa o en ambientes poco ruidosos. Es compatible con conversaciones individuales con sonido claro y natural, ofreciendo confort además de conciencia del sonido ambiental.



Ambiente



Tipo de conversación

Encanta 200 GO

Conectado con el exterior

Para usuarios que dependen de sus audífonos para la comprensión del habla en ambientes ruidosos. Es compatible con la comprensión del habla durante conversaciones individuales mediante administración de ruido adaptable.



Ambiente



Tipo de conversación

Conversación sin interrupciones

Con la nueva tecnología **Smart Sensor** en Encanta 300 y 400, los usuarios pueden obtener una comprensión del habla aún mejor en las conversaciones individuales y en grupo. Detecta el movimiento de la cabeza y el cuerpo para ajustar automáticamente la direccionalidad y la supresión de ruido para satisfacer las necesidades cambiantes de tus pacientes.



Encanta 300 ENGAGE

Participa con el grupo

Para usuarios que desean una vida social activa y participan a menudo en conversaciones con múltiples personas hablando. Con la ayuda del Smart Sensor experimentarán una transición sin interrupciones, de estar centrado en una persona en un grupo a participar en una conversación de grupo más amplia en ambientes sonoros complejos.



Ambiente



Tipo de conversación

Encanta 400 PRO

Preparado para todo

Para usuarios que deseen una calidad de sonido intachable y la mejor tecnología para respaldar la comprensión del habla en cualquier ambiente. Ofrece la mayor asistencia y el máximo rendimiento en los entornos de escucha más complejos.



Ambiente



Tipo de conversación

Conectado con la conversación



Ruido
bajo

Ambiente



1:1

Tipo de conversación

Encanta 100 es para usuarios que pasan la mayor parte de su tiempo en casa o en ambientes poco ruidosos. Es compatible con conversaciones individuales con sonido claro y natural, ofreciendo confort además de conciencia del sonido ambiental.

Un sonido claro y natural

Cuáles son las diferencias de la calidad de sonido Bernafon

Los detalles son esenciales para obtener un sonido excepcional. Encanta amplifica el sonido como ningún otro audífono. Utiliza una canal de banda ancha único para procesar señales de modulación rápida como el habla y la música. Esto conserva intactos los patrones naturales del habla y preserva la calidad de la entrada de música. Combinado con 24 bandas de frecuencia para procesar señales de modulación lenta como el ruido, Encanta logra una claridad de sonido y confort de escucha excepcionales.



Calidad de sonido
Bernafon



Smart Noise
Reduction



Empoderado con conciencia de 360°

Direccionalidad omni fijo

Capta sonidos de todas las direcciones, ya sea el habla desde otra habitación o el timbre que suena.

Smart Noise Reduction básica

Ofrece hasta 6 dB de supresión de ruido. Esto ayuda a mejorar la calidad de sonido y la claridad del habla en ambientes poco ruidosos.



Puedes contárselo a tus pacientes

Encanta 100 enriquecerá tus conexiones en el hogar con la familia y los amigos. Logra aclarar las voces bajas y altas para tener conversaciones individuales fantásticas. Y les permite escuchar todo lo que pasa a su alrededor con un sonido claro y natural.

Conectado con el exterior



Ambiente




Tipo de conversación

Encanta 200 es para usuarios que dependen de sus audífonos para la comprensión del habla en ambientes ruidosos. Es compatible con la comprensión del habla durante conversaciones individuales mediante administración de ruido adaptable.

Optimizar la comprensión del habla en conversaciones individuales con ruido

Cuáles son las diferencias de Smart Noise Management

El nuevo sistema avanzado Smart Noise Management de Encanta ayuda a tus pacientes a centrarse en lo más importante, la persona con la que están hablando, no en el ruido a su alrededor. Para ofrecer la mejor relación señal-ruido (SNR) para la comprensión del habla, Encanta 200 combina dos tecnologías de procesamiento de la señal que interactúan sin interrupciones. De esta forma, tus pacientes obtienen una mejor calidad de sonido, habla aún más clara y confort de escucha en presencia de ruido.

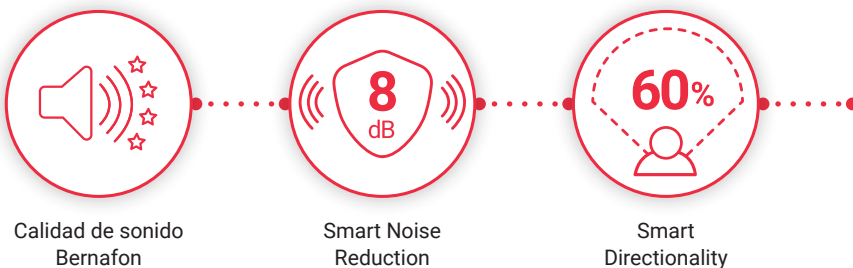



Mejorar la claridad del habla

Smart Directionality

Es inteligente porque localiza automáticamente la procedencia del ruido para poder suprimirlo de forma eficiente.

Smart Noise Reduction mejorada

Es inteligente porque el aprendizaje inteligente ampliado puede distinguir mejor entre habla y ruido, logrando más eficiencia en la supresión de ruido.



Puedes contárselo a tus pacientes

Encanta 200 es genial para disfrutar la vida fuera del hogar. Ofrece comprensión del habla cómoda y sencilla durante las conversaciones individuales que suceden en situaciones de escucha ruidosas en exterior e interior.

Participa con el grupo



Ambiente



Tipo de conversación

Encanta 300 es para usuarios que desean una vida social activa y participan a menudo en conversaciones con múltiples personas hablando. En una situación de grupo ofrece una transición sin interrupciones, de estar centrado en una persona en un grupo a participar en una conversación de grupo más amplia en ambientes sonoros complejos, gracias a la nueva tecnología Smart Sensor.

Optimizar las conversaciones en grupo

Cuáles son las diferencias de la nueva tecnología Smart Sensor

Encanta 300 amplía Smart Noise Management con el revolucionario Smart Sensor. Esta tecnología de sensor de movimiento reconoce los movimientos de la cabeza y el cuerpo. Utiliza esa información para ajustar la Smart Directionality y los niveles de Smart Noise Reduction para optimizar la comprensión del habla en situaciones con múltiples personas hablando.



Calidad de sonido
Bernafon



Smart Noise
Reduction



Smart
Directionality



Tecnología
Smart Sensor



Transiciones sin interrupciones con ruido

Cómo funciona Smart Sensor

Cuando tu paciente está centrado en una persona, Smart Sensor incrementa la direccionalidad e incrementa la supresión de ruido, ayudándoles a centrarse en la persona con la que están hablando.

Si tu paciente mueve la cabeza de izquierda a derecha en una conversación en grupo, o si camina por una calle ruidosa, el sistema cambia automáticamente a un modo más omni y reduce el nivel de supresión de ruido. Esto les permite ser más conscientes de todo el entorno que les rodea.



Puedes contárselo a tus pacientes

Encanta 300 les permitirá participar de forma completa en las conversaciones en grupo, para que puedan cambiar de estar centrados en una persona en un grupo a participar en una conversación en grupo más amplia en ambientes ruidosos, como en un restaurante o reunión de trabajo.


Preparado para todo



Ambiente



Tipo de conversación

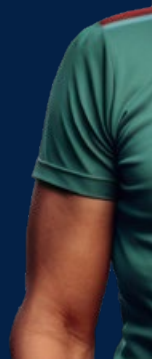

Encanta 400 es para usuarios que desean una calidad de sonido intachable y la mejor tecnología para respaldar la comprensión del habla en cualquier ambiente. Ofrece la mayor asistencia y el máximo rendimiento en las situaciones de escucha más complejas.

Comprensión del habla y claridad de sonido óptimos

Todo al máximo

Con Encanta 400, tus pacientes se benefician de la máxima potencia de Smart Directionality y el Smart Noise Reduction, que incluye más supresión de ruido que nunca, hasta 12 dB. Combinado con la tecnología Smart Sensor y el ancho de banda ampliado, tus pacientes pueden disfrutar de calidad de sonido refinada, claridad del habla y confort de escucha, incluso en los ambientes de grupo más ruidosos.



Calidad de sonido
Bernafon



Smart Noise
Reduction



Smart
Directionality



Tecnología
Smart Sensor




Ancho de banda
ampliado



Claridad de sonido aún más completa

Cuáles son las diferencias del ancho de banda ampliado

Encanta 400 ofrece ancho de banda ampliado, que va de 80 Hz a 10 kHz. Esto ofrece a tus pacientes acceso a un espectro de sonidos más completo, para una experiencia de sonido más clara y matizada. Disfrutarán de una experiencia más real tanto en frecuencias bajas como altas y de una gama más amplia de sutilezas acústicas, como por ejemplo, con la música.

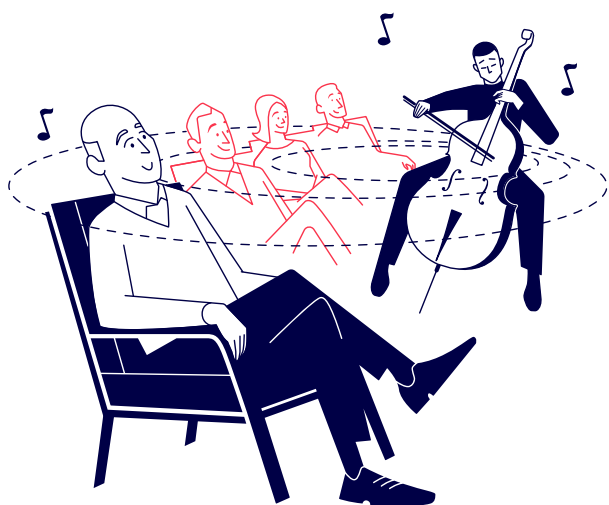

Puedes contárselo a tus pacientes

Encanta 400 significa que independientemente de lo ruidosa que sea una situación o cuántas personas participen, dispondrán de la tecnología Bernafon más avanzada para respaldar la comprensión del habla en cualquier ambiente.

DATOS DE RENDIMIENTO

Una familia de evidencia

Seleccionar un audífono con el nivel de tecnología más apropiado es complicado para cualquier usuario potencial. Es por ello que hemos probado nuestros cuatro niveles de tecnología para lograr que los beneficios demostrados de cada solución sea más tangible para ti y la calidad de vida de tus pacientes.


Cuatro resultados clínicos para la familia Encanta*

Mejor comprensión del habla en conversaciones individuales			
Resultados		Prestaciones clave	Beneficios
Encanta 100 CONNECT	11 dB SPL con silencio ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Amplification 	Comprensión del habla sin que la persona que habla tenga que alzar la voz.
Encanta 200 GO	30 % con ruido ²	<ul style="list-style-type: none"> • 8 dB de Smart Noise Management • Smart Amplification 	Mejora significativa de la comprensión del habla en conversaciones individuales con ruido.
Mejor comprensión del habla en conversaciones de grupo con ruido			
Resultados		Prestaciones clave	Beneficios
Encanta 300 ENGAGE	15 % ³	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Sensor • 10 dB de Smart Noise Management • Smart Amplification 	Comprensión del habla mejorada en conversaciones en grupo en ambientes ruidosos, donde la persona que habla cambia de posición.
Encanta 400 PRO	19 % ³	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de banda ampliado • Smart Sensor • 12 dB de Smart Noise Management • Smart Amplification 	

Pruebas de conversación en grupo con ruido

Las conversaciones en grupo son complejas y exigentes, a menudo incluyen entornos ruidosos, fuentes de habla impredecibles, solapamiento de habla y cambios de atención. Hemos realizado pruebas con Encanta 200, 300 y 400 simulando una conversación en grupo compleja con ruido. Los resultados demostraron que incorporar la tecnología Smart Sensor en Encanta 300 y Encanta 400 doblaba el beneficio³ de la Smart Noise Management en las conversaciones en grupo.

La diferencia de Smart Sensor

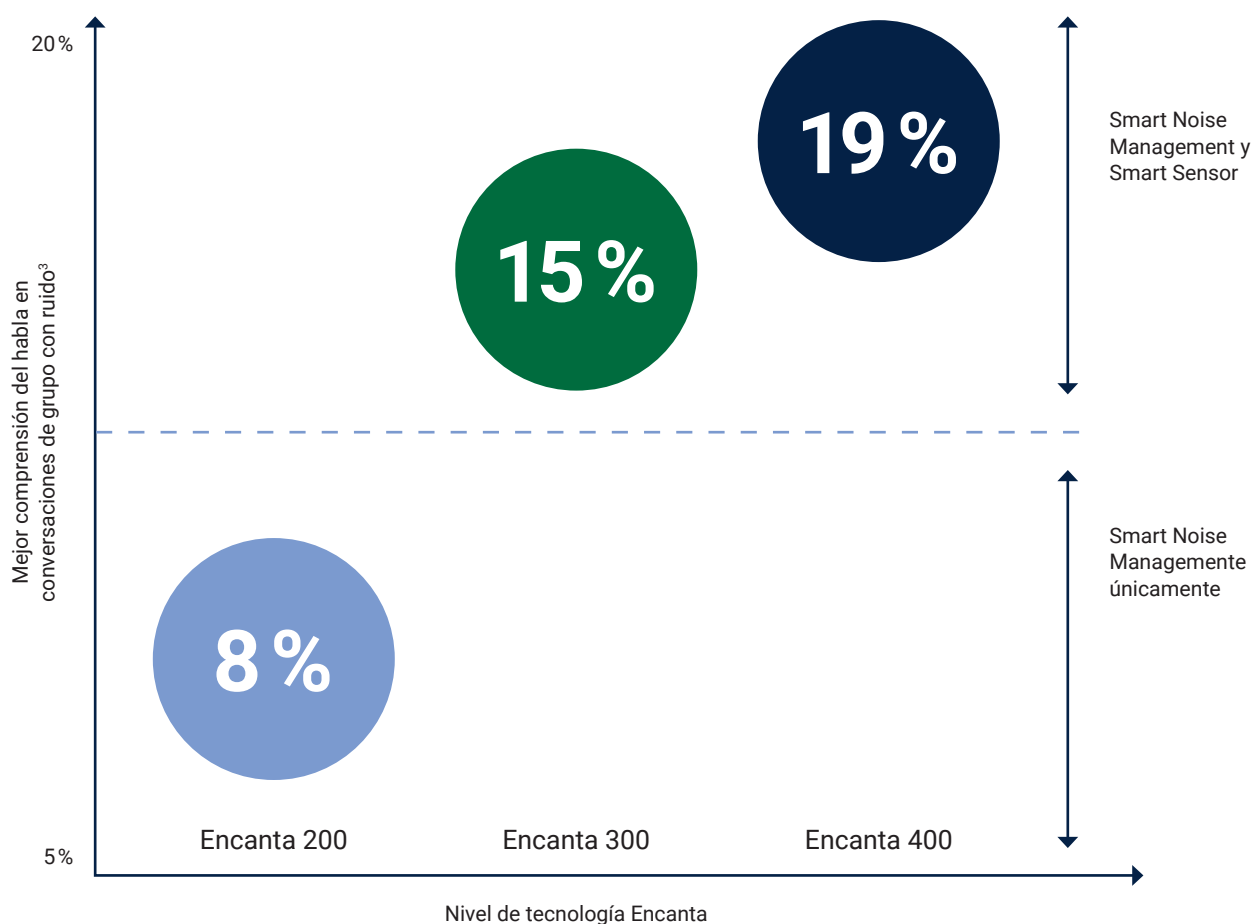

* Todos los datos se recopilaron durante un ensayo clínico entre agosto y octubre de 2023 con 25 participantes y una edad media de 73 años, un uso medio de audífono de 12 años y un umbral auditivo simétrico medio de 47dB HL (125 Hz-8 kHz). Todos los datos comunicados son significativamente diferentes de su referencia respectiva.

¹ La comparación de la inteligibilidad del habla de Encanta 100 (11dB SPL) se encuentra entre la SRT50 con amplificación y sin amplificación con silencio.

² La comparación de la inteligibilidad del habla de Encanta 200 con ruido (OLSA, 2,3dB SNR) se encuentra entre la SRT50 obtenido con y sin ampliación del ruido (objetivos de ganancia NAL-NL2).

³ La comparación de la inteligibilidad del habla de Encanta 200, 300 y 400 (CCOLSA, 8%, 15%, 19% respectivamente) se encuentra entre la inteligibilidad obtenida con y sin ampliación del ruido (referencia Encanta 200 con objetivos de ganancia NAL-NL2).

SOFTWARE DE ADAPTACIÓN OASIS^{next}

Mejores primeras adaptaciones



Conseguir una buena primera adaptación tiene muchas ventajas potenciales. Aceptación más alta del usuario, mayor uso y satisfacción, menos devoluciones, menor necesidad de ajustes finos, y te ahorra mucho tiempo, por nombrar algunas. Los audífonos Bernafon son famosos por ofrecer una primera adaptación cómoda, gracias a la metodología de adaptación única BernaFit NL. Y el software de adaptación Oasis^{next} es famoso por su facilidad de uso.

¡NUEVO!

Aún mayor precisión

Las nuevas unidades de auricular miniFit Detect mejoran la experiencia de la adaptación para ti y tus pacientes.

- Una adaptación más sencilla y rápida con menos errores a la hora de adaptar el auricular adecuado.
- Más precisión con base en los datos de calibración dentro de +/- 1 dB de ganancia objetivo en las 24 bandas de frecuencia

Centrados en tus pacientes

La **Herramienta de personalización** te ayuda a ofrecer primeras adaptaciones óptimas. Valora las percepciones acústicas y preferencias de cada paciente según las respuestas a las preguntas clave, para adaptaciones más individualizadas.

Ajuste sencillo y guiado

El **Asistente de adaptación** guía la conversación con tus pacientes para evaluar sus necesidades en la mayoría de las situaciones de escucha. Las indicaciones de ajuste fino le ayudan a utilizar todo el potencial de cada característica.

Monitorizar los progresos del paciente

Datos de la conversación realiza un seguimiento del entorno sonoro de tu paciente y de su nivel de participación en las conversaciones a lo largo del tiempo. Esto te aporta valiosos datos de orientación para discutir su recorrido auditivo y preferencias.

¡NUEVO!

Sonido más enriquecido con extensión de frecuencia baja

El programa Music Experience ya puede transmitir sonidos bajos al oído con amplificación desde 80 Hz, ofreciendo a tus pacientes una sensación de un sonido más enriquecido.





MÚSICA

Una experiencia más completa

Bernafon dispone de una larga historia ofreciendo una experiencia musical excepcional mediante un algoritmo único para amplificar la música en directo y grabada. Encanta se ha diseñado con nuevas actualizaciones para que la experiencia musical de tus pacientes sea aún mejor, da igual si son músicos o amantes de la música.

Calidad de audio más precisa para la música

El Potenciador de frecuencias graves actualizado se ha optimizado para mejorar la calidad de sonido durante la transmisión de música.

Adaptación para un mayor disfrute de la música

Con el software de adaptación Oasis^{next} también puedes realizar un ajuste fino del programa Music Experience para tus pacientes. Especialmente los músicos pueden beneficiarse de esta flexibilidad adicional.

Los músicos confirman
un rendimiento excelente

85%

de este exigente grupo de usuarios prefirió Music Experience ante el programa de habla estándar al escuchar música en directo, grabada o transmitida.*

*2021: En base a datos clínicos obtenidos en Bernafon AG, Berna, Suiza.

Conectividad avanzada para más usuarios


La conectividad importa. Encanta ofrece una gran mejora en conectividad y transmisión para todos los usuarios. Tus pacientes también reciben una autonomía de batería increíble gracias a Bluetooth® Low Energy.

Made for iPhone®

Los pacientes que utilicen un iPhone o iPad reciben audio bidireccional, transmisión directa y todas las ventajas de la comunicación manos libres.

Pon el control en sus manos con Bernafon App

La aplicación mejorada facilita más que nunca que tus pacientes disfruten de un control discreto, personalización y ajuste remoto. Y obtienes datos útiles para que su día sea más eficiente.

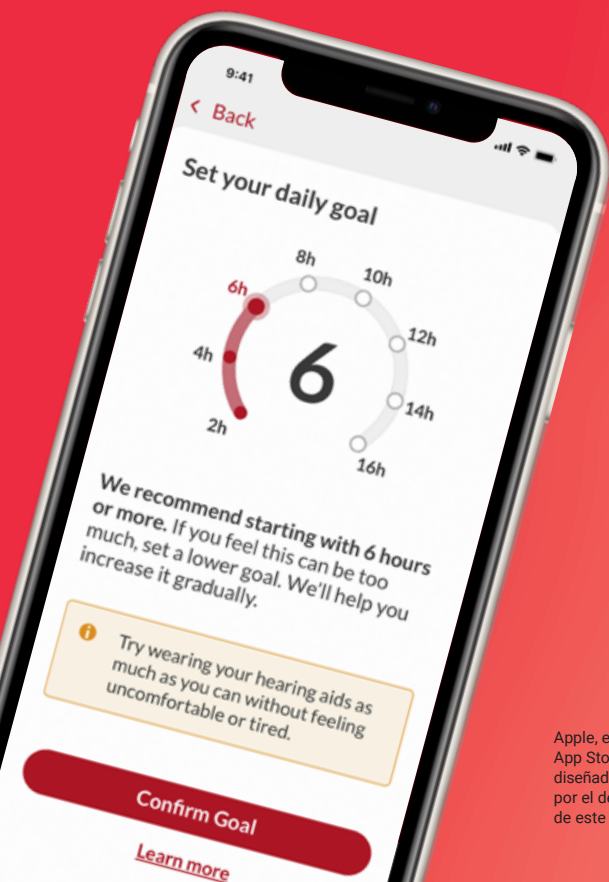

NUEVO Una revolución en la conectividad Android

Encanta es totalmente compatible con todos los teléfonos Android con LE Audio habilitado, la última tecnología Bluetooth®.* LE Audio combina lo mejor de la transmisión bidireccional fiable y la comunicación manos libres con un bajo consumo de energía.

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

*LE Audio – Low Energy Audio.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod Touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. El uso del distintivo Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o productos de Apple identificados en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.

Un día completo de autonomía en sólo una hora

Simplemente son mucho más rápidos. Los audífonos Encanta recargables se fabrican con un nuevo cargador más pequeño enfocado en la eficiencia.



2 horas: carga al 100 %

60 minutos: 16 horas (carga de día completo)

30 minutos: 8 horas

15 minutos: 4 horas





Puedes contárselo
a tus pacientes

Una carga más eficiente
puede facilitar sus vidas y
ofrecer tranquilidad
durante todo el día.

¡NUEVO!

- Tamaño de cargador más pequeño
- Carga más rápida
- Hasta 24 horas de energía con una carga completa
- Diseñado para 5 años de vida útil de batería

Guía rápida de la familia Encanta

	Encanta 100 CONNECT 	Encanta 200 GO 	Encanta 300 ENGAGE 	Encanta 400 PRO 
Smart Amplification	Sí	Sí	Sí	Sí
Smart Sensor	No	No	Sí	Sí
Smart Directionality	No	Hasta un 60% de efecto	Hasta un 80% de efecto	Hasta un 100% de efecto
Direccionalidad Omni	Fija	Fija	Efecto pinna	Efecto pinna
Smart Noise Reduction	Hasta 6 dB	Hasta 8 dB	Hasta 10 dB	Hasta 12 dB
Reducción de ruido transitorio	Hasta 15 dB	Hasta 20 dB	Hasta 25 dB	Hasta 30 dB
Ruido de viento/contacto	Sí	Sí	Sí	Sí
Ancho de banda	8 kHz	8 kHz	8 kHz	10 kHz
Bandas de adaptación	14	18	20	24

El rendimiento se combina con el diseño

Una dedicación a un gran diseño significa que Encanta es elegante y ergonómico, con un nuevo formato miniRITE que es más pequeño al mismo tiempo que más discreto.



Bernafon Encanta se ha diseñado en ocho atractivos colores



La experiencia del sonido Bernafon

En Bernafon entendemos que empoderar el trabajo de los audioprotesistas forma parte de nuestra tarea. Para ayudarles a ofrecer un cuidado excelente, siguiendo sus estándares. Porque sabemos que la experiencia importa. El cuidado profesional es la clave que convierte la tecnología extraordinaria en soluciones personales. Soluciones que ayudan a las personas con pérdida auditiva a vivir la vida que desean. Como parte de Grupo Demant, con más de un siglo de experiencia y conocimientos, Bernafon se beneficia de uno de los equipos de investigación y desarrollo más sólidos del mundo del cuidado auditivo. Llevamos esta experiencia y pasión a los profesionales de la audición para que puedan ofrecer una experiencia sonora excepcional.

Para obtener más información sobre nuestros audífonos, visita nuestro sitio web [Bernafon.com](https://www.bernafon.com)

Sede mundial

Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Dinamarca

Imágenes: se han utilizado programas de inteligencia artificial (IA) para crear algunas de las imágenes

Empresas Bernafon

Australia • Canadá • China • Dinamarca • Finlandia • Francia • Alemania • Italia • Japón • Corea • Países Bajos • Nueva Zelanda • Polonia • Sudáfrica • España • Suecia • Suiza • Turquía • Reino Unido



www.bernafon.com

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE